ANIOSPRAY 29

CE 0459

Désinfectant à pulvériser





- **Formulé sans aldéhyde, sans colorant ni substance parfumante**
- **Large spectre antimicrobien (B.K., HIV-1, HBV et Rotavirus)**
- **Large compatibilité avec tout type de matériaux et dispositifs médicaux**
- **Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation**
- **Référencé dans la Liste positive S.F.H.H.**



PRÊT A L'EMPLOI

INDICATIONS

Désinfection rapide des dispositifs médicaux propres en blocs opératoires, services à hauts risques, salles d'examen, services de soins...

CARACTERISTIQUES

- Produit prêt à l'empoi.
- Solution limpide incolore.
- pH à +20°C : env. 5,5.
- Pourcentage d'éthanol : 29% v/v.
- Point d'éclair : +33°C.
- Produit testé selon APAVE
- Utilisable dans les pulvérisations manuels ou à pression préalable.

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

AFAQ ISO 9001 — CERTIFIED E.Net QUALITY SYSTEM




ANIOSPRAY 29

Désinfectant à pulvériser

MODE D'EMPLOI


A utiliser avec un pulvérisateur manuel ANIOS ou à pression préalable (Spraymatic 10S...)

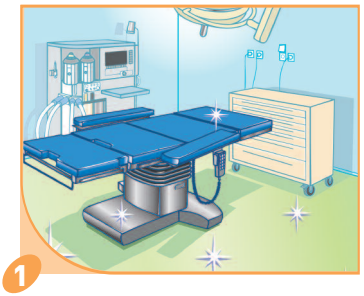

1 Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant type SURFANIOS.



2 Pulvériser un film uniforme sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce, jusqu'à la sortie.

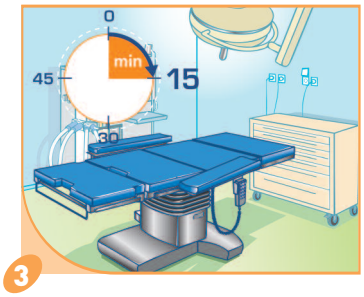

3 Laisser la pièce fermée (porte et fenêtres) pendant **15 minutes minimum** (il est préférable d'attendre 30 minutes et d'aérer si possible avant réutilisation).

COMPOSITION QUALITATIVE

Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, éthanol, acide glycolique.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Inflammable - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage entre +5°C et +25°C.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 1276 SARM (EN 13727) NF T 72-171	**5 minutes**
Mycobactéries	M. tuberculosis (B.K.)	**5 minutes**
Levures / Moisissures	EN 1275 (C. albicans)	**5 minutes**
	T 72-301 (A. niger, A. fumigatus)	**15 minutes**
Virus	HIV-1, HBV, BVDV (virus-modèle HCV), Influenzavirus (H_1N_1, H_5N_1)	**5 minutes**
	Rotavirus	**15 minutes**

CONDITIONNEMENTS

1 12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs ..... Réf. 1135.073
2 4 bidons de 5 litres ..... Réf. 1135.034

Appareils de pulvérisation
Spraymatic 10S ..... Réf. 411.110
Pulvérisateur 1.2L à réserve de pression ..... Réf. 411.100



laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

1135FR - 2008.03C - Photos non contractuelles