
médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Sangle Araignée Multicolore pour Plan Dur – Immobilisation Patient – Attaches Velcro

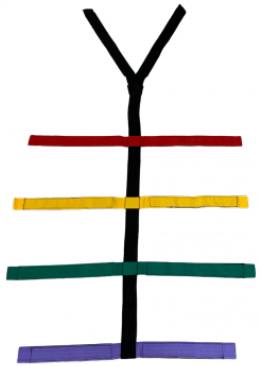

La sangle araignée multicolore est un dispositif d'immobilisation destiné au maintien sécurisé d'un patient sur un plan dur ou une civière **de relevage** lors des opérations de secours et de transport. Sangles en polypropylène, largeur 5 cm, fixation par Velcro. Lavable à 40°C.
Conçue pour les professionnels du secours, elle permet une fixation efficace des différentes parties du corps afin de limiter les mouvements et assurer la stabilité du patient pendant la prise en charge.

Référence 112060C

Description du produit :

Type de produit : Sangle araignée d'immobilisation
Utilisation : Plan dur / civière de relevage
Largeur des sangles : 5 cm
Type d'attaches : Velcro (scratch)
Matière : Toile en polypropylène
Couleur : Multicolore (repérage rapide des points d'attache)
Entretien : Lavable en machine à 40°C

Mode d'emploi: L'utilisation doit être réalisée par du personnel habilité et formé.
- Avant utilisation, repérer les blessures du patient et adapter la mise en place en conséquence.
- Vérifier l'état du produit avant chaque utilisation.
- Placer le patient sur le plan dur.
- Fixer les différentes parties du corps à l'aide de la sangle araignée.
- Vérifier que les sangles maintiennent correctement le patient.
- Pendant le transport, surveiller les scratchs au niveau des cuisses et les ajuster si nécessaire.

Stockage et entretien
- Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau claire ou un détergent dilué en cas de salissure.
- En présence de sang ou de liquides biologiques, utiliser un désinfectant adapté avant nettoyage.
- 1Lavable en machine à 40°C.
- Stocker dans un endroit propre et sec.

médic affaires
Matériel médical professionnel
www.medicaffaires.com

Garantie: 1 An Normes - Classification - Mentions obligatoires Désignation: Sangle araignée pour Plan Dur **Utilisation et instructions:** Lire la notice avant utilisation - L'opérateur doit d'abord lire le manuel, faire fonctionner le produit correctement et l'examiner avant utilisation **Marquage CE:** Dispositif médical de classe I conformément au règlement européen UE 2017/745